


ENDO

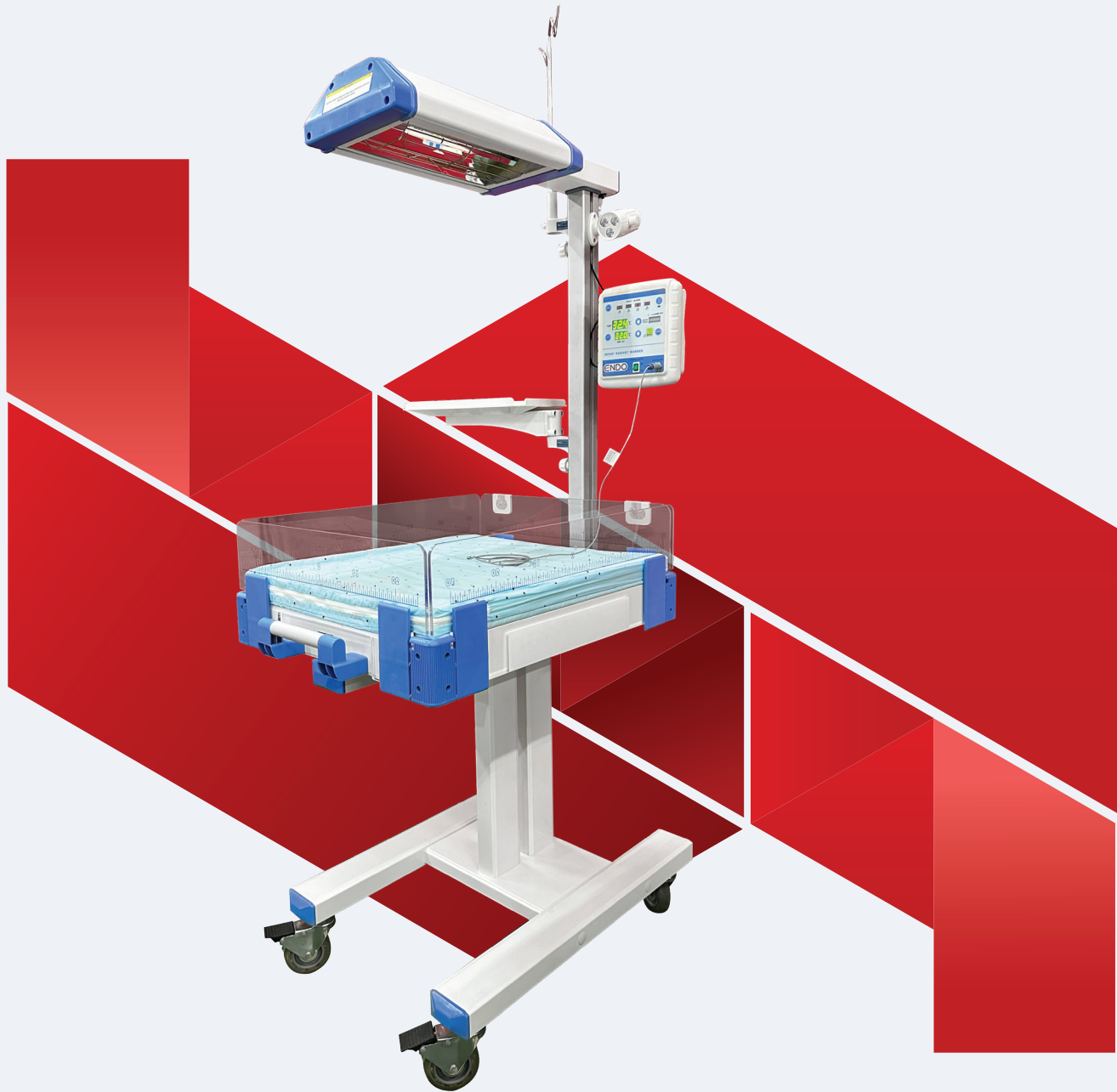

ENDO.EI.IRW.2


Infant Radiant Warmer

<https://endo.id>

ENDO.EI.IRW.2 Ifant Radiant Warmer

Fitur-fitur

- Sistem suhu dikontrol oleh servo berbasis mikroprosesor
- Dua mode: manual dan automatic
- Suhu yang diatur dan suhu kulit ditampilkan pada LED
- Fungsi alarm :
Kegagalan daya listrik, penyimpangan suhu, kegagalan sensor suhu, kegagalan suhu kulit, suhu berlebih Lampu LED dan kecerahan layar dapat disesuaikan
- Menggunakan tabung radiasi inframerah kristal kuarsa anti-ledakan
- Terdapat 4 pembatas tempat tidur transparan yang dapat dilipat dengan dua segel infus
- Dilengkapi konektor RS-232 dan satu tray

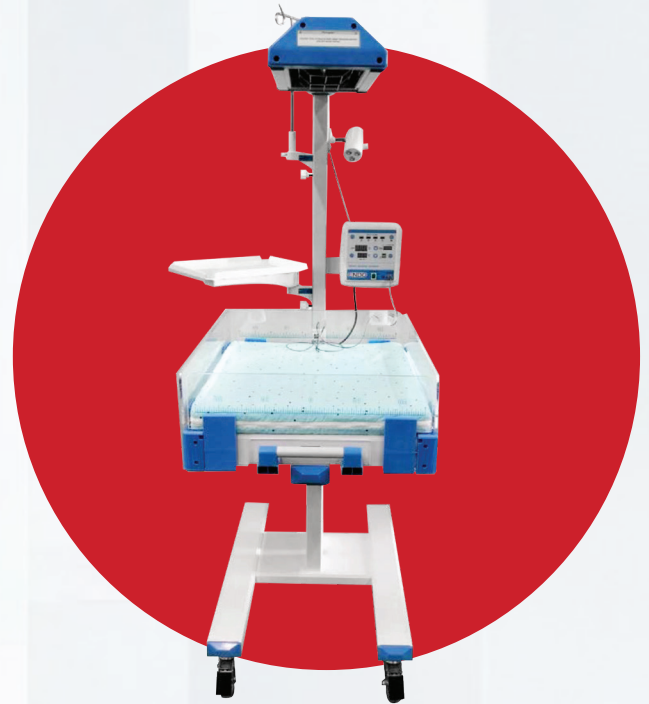

Spesifikasi Teknis

Sumber daya listrik		AC110/220V 60/50Hz
Daya masuk		900VA
Kondisi Lingkungan Kerja	Suhu lingkungan	18°C ~ 30°C
	Kelembaban	30% ~ 75%
	Tekanan atmosfer	700~1060 hpa
	Kecepatan aliran udara	<0.3m/detik
Rentang pengaturan suhu		32°C ~ 38°C
Akurasi pengaturan suhu		≤0.5°C
Akurasi sensor suhu		±0.3°C
Keseragaman suhu matras		<2°C
Waktu pemanasan (dari 25°C)		<30menit
Jarak dari pemanas ke matras		80cm
Ukuran matras		67cmX54cm

Spesifikasi Fisik

Kemasan

Setiap unit dikemas dengan kotak kayu

- Ukuran: 110*78*86cm
- Berat bersih: 65Kg
- Berat kotor: 85Kg

Konfigurasi standar

Unit Utama (Sumber Radiasi, Sistem Kontrol, Tempat Tidur Bayi, Braket), Tiang I.V., Sensor Suhu, Tray, Matras, Pembatas Tempat Tidur Transparan, Roda, RS-232

Fungsi Opsional




**Kanopi pemanas
dengan grid logam**



Kolom rel samping



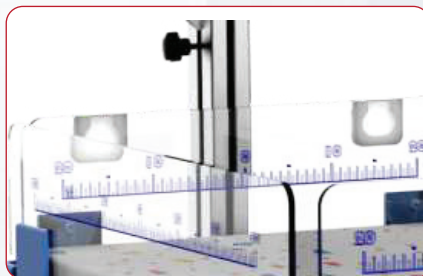

**Material campuran
Aluminium**




2 segel infus

ENDO


 Jalan Raya Menganti 14 Kedurus, Surabaya 60223
Jawa Timur, Indonesia

 62-31-7673636

 info@endo.id

 62-31-7673737

 <https://endo.id>

 0800 . 177 . ENDO (3636)