


# ENDO

## ENDO CO2 Insufflator El.Lap.INS3

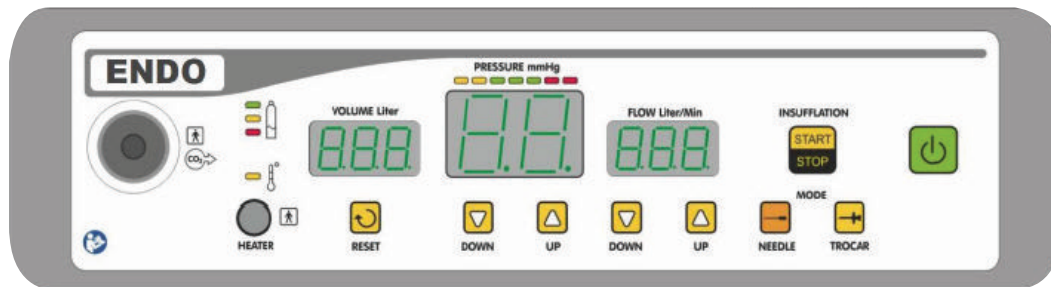

ENDO CO2 Insufflator type El.Lap.INS3 adalah perangkat untuk insufflate gas Co2 ke dalam perut selama laparoskopi (Diagnostik dan prosedur bedah laparoskopi). Dalam rangka untuk mendapatkan kondisi visibilitas yang tinggi dan ruang memadai untuk prosedur endoskopi, rongga tubuh harus dilebarkan dengan Co2. Kelebihan dari unit ini dapat memudahkan pemantauan selama proses insufflation. Teknologi pengisian ulang gas yang dikendalikan secara elektronik, memastikan perawatan pneumoperitoneum dimana adanya abnormal udara atau gas lainnya di rongga peritoneum, ruang potensial dalam rongga perut. Tujuan untuk memasukan gas Co2 secara bertahap ke dalam perut sebelum dan saat proses pembedahan laparoscopy dilakukan.

### SPESIFIKASI Elektrik

Voltase Utama	100-240 V/AC
Frekuensi Listrik	50-60 Hz
Konsumsi saat ini	max. 1.4 A
Sekering Listrik (2pcs)	T 3.15 A/H

### SPESIFIKASI Insufflasi

Tekanan Inflasi	1-30 (max 65) mmHg
Akurasi Pengukuran Tekanan	+/- 5%
Aliran Gas	1-xx <sup>3</sup> liter.mnt
Akurasi Tampilan Aliran Gas	+/- 10%
Gas Insuflasi	Gas karbondioksida medis CO2 / maks 80 bar
Koneksi Gas	UNF 7/16"
Dimensi (WxHxD)	355 x 105 x 285 mm
Massa	sekitar 6,7 kg